

PREDVIĐENO ZA KORIŠĆENJE



ZA KOLENO



ZA RAME



ZA LAKAT

DISTRIBUTER ZA SRBIJU
INTERGREEN PROFESSIONAL DOO
www.boloviuledjima.rs
prodaja@boloviuledjima.rs

NEGA ZGLOBOVA Uputstvo za upotrebu



Hvala što ste poručili masažer za negu zglobova. Uputstvo za upotrebu pruža važne informacije za rukovanje i sigurnost. Molimo Vas pročitajte pažljivo i razunite u potpunosti pre korišćenja.


Napomena: Ovaj uređaj nije predviđen za medicinsku upotrebu. Njegova namena je isključivo da omogući opuštajuću masažu kod kuće.

KARAKTERISTIKE

- * Infrared svetlo i terapija toplotom (700-50,000 nm talasna dužina)
- * Podešavajuća temper. 40-65 C
- * Magnetna terapija (2x magnet, 1,100 gausa)
- * Vibraciona masaža (7,000 RPM)
- * Odvojive i podešavajuće trake za lakat, rame i koleno
- * Sadrži tri trake (1x100cm, 2x35cm)
- * Udobno, ergonomski dizajnirano postavljeno telo.
- * Funkcija memorisanja temperature

- * Automatsko isključenje posle 30 minuta
- * Priključuje se u električnu utičnicu

DELOVI

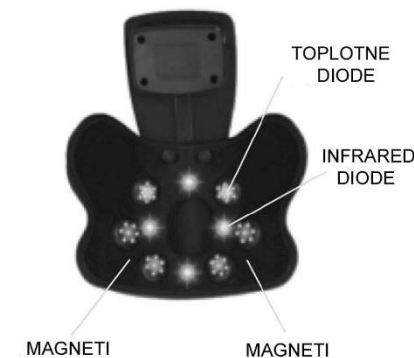

KAKO SE KORISTI

1. Namestite podlogu na zglob.
2. Postavite masažer preko podloge, tako da je kontrolni displej na gore.
3. Podesite kaiševe tako da je uređaj dobro zategnut i nalegnut na zglob.
4. Za najbolji efekat, postavite uređaj da naleže što bliže zglobu.
5. Uključite uređaj u adapter, a adapter u struju.
6. Upaliće se led svetla na kontrolnom displeju i ekran će pokazati „—„.
7. Da uključite funkciju infrared svetla, pritisnite START/STOP dugme jedanput na kontrolnom panelu. Infrared terapija će početi sa delovanjem, a ekran će pokazati 40C (osnovna minimalna temperatura).
8. Pritisnite UP ili DOWN dugme na kontrolnom panelu da podesite željenu temperaturu (maks. 65 C). Termostat će kontrolisati nivo automatski. Prestaće sa grejanjem kada uređaj dostigne zadatu temperaturu, i početi sa grejanjem kada temp. padne ispod zadate. (toplotne diode će se paliti i gasiti za vreme grejanja). Ako ne želite toplotnu terapiju, možete izabrati samo infrared terapiju. Pritisnuti dugme DOWN i smanjite temperaturu na minimum, i uređaj će emitovati samo infrared terapiju.
9. Da ugasis funkciju infrared/grejanje, pritisnuti START/STOP dugme na kontrolnom panelu. Ekran će pokazati „—„.
10. Pritisnuti On/Off dugme da uključite vibracionu masažu. (On/Off prekidač se nalazi na levoj strani, ispod masažera.)

NAPOMENE

- * za temperaturu između 45°C-55°C, jedinica za povećanje je 5°C, a između 56°C-65°C, jedinica za povećanje je 1°C, zbog veće tačnosti
- * Za ponovno korišćenje uređaj će početi sa 40°C.
- * Standardno vreme za infrared/toplotnu terapiju je 30 minuta. Pritisnuti Start/Stop dugme na kontrolnom panelu ponovo, ako želite novi ciklus.
- * Ne postoji standardno vreme za vibracionu masažu. Možete je uključiti ili isključiti u bilo koje vreme
- * Infrared/toplotna terapija i vibraciona masaža su nezavisno kontrolisane.
- * Za najbolje rezultate, koristite uređaj 2 do 3 puta u toku dana po 30 minuta.

SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

- Molimo Vas pažljivo pročitajte sigurnosne instrukcije pre korišćenja masažera. Ako imate problema sa bilom kojim medicinskim stanjem dole navedenim, konsultujte svog doktora pre korišćenja uređaja. Preporučujemo da se konsultujete sa svojim doktorom ako:
- * patite od bolesti srca
 - * imate senzorski poremećaj ili pejsmejker
 - * patite od osteoporoze ili dijabetesa
 - * ako vam je doktro zabranio da vežbate
 - * ako ste trudni
 - * ako imate maligni tumor ili alergiju kože
 - * ako ste pod medicinskim tretmanom
 - * ako ste fizički onemogućeni

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- * Uređaj je predviđen za upotrebu kod kuće.
 - * Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora, dok je uključen u struju
 - * Uvek ga isključite iz struje, kada završite sa upotrebom.
 - * Ne koristite uređaj u blizini izvora toplote, vatre i izbegavajte da pušite dok koristite uređaj.
 - * Ne koristite uređaj ako je oštećen kabl za struju ili strujna utičnica.
 - * Uređaj uključite u struju kada je prekidač za paljenje u OFF poziciji.
 - * Ne koristite ovaj uređaj u sauni, kupatilu ili u prostoriji sa velikom vlagom.
 - * Ne koristite uređaj ako je mesto na telu, gde hoćete da koristite uređaj, mokro/vlažno.
 - * Sačekajte 60 minuta posle jela, da bi koristili ovaj uređaj.
 - * Ne koristite ovaj uređaj više od 60 minuta konstantno. Uvek napravite pauzu od 5-10 minuta ako želite da koristite više ciklusa.
 - * Držite uređaj van domašaja dece.
 - * Ne koristite uređaj dok spavate.
 - * Da izbegnete prekomernu stimulaciju mišića i nerava, masaža ne bi trebala da prelazi preporučeno vreme od 60 minuta (osnovno vreme je 30 minuta)
- UPOZORENJE: DA SMANJITE RIZIK OD OPEKOTINA, VATRE, ELEKTRIČNOG UDARA ILI POVREDE*
- * Ne koristite uređaj pod čebetom, pokrivačem ili ostalim materijalima. Prekomerna toplota može izazvati

požar, električni udar ili povredu korisnika.

- * Koristite uređaj samo za predviđenu upotrebu, objašnjenu u ovom upustvu.
- * NE koristite uređaj ako je oštećen kabl ili utičnica. Uređaj neće raditi kako je predviđeno. Ili ako je uređaj ispao ili oštećen, ili ako je pao u vodu.
- * Ne nosite uređaj držeći ga za kabl za napajanje, ili kabl koristiti kao ručku.
- * Isključite sve funkcije u OFF poziciju, pre nego iskopčate kabl iz struje.
- * Koristite isključivo originalan AC adapter, koji dolazi uz uređaj.
- * Izbegavajte da koristite produžni kabl. Može doći do pregrevavanja i eventualnog požara.
- * Ne koristite uređaj na proširenim venama.
- ČUVANJE I ODRŽAVANJE**
- * Odložite uređaj na suvo mesto bez vlage.
- * Ne motati kabl za napajanje oko uređaja.
- * Ne kačite uređaj koristeći kabl.
- * Uređaj držati dalje od razređivača ili grubih deterdženata.
- * Iskopčajte uređaj iz struje, i sačekajte da se ohladi pre čišćenja. Koristite suvu i čistu krpu.
- * Nikad ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
- * Ne koristite abrazivne čistače, četke, naftu, kerozin ili sredstva za poliranje stakla i nameštaja ili razređivač da očistite masažer.